



"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"

L3 Médical

Ascend™ Bucco nasal

Masque bucco nasal à coussin de gel amovible

Le masque bucco nasal *Ascend™* est un nouveau masque équipé d'un coussin de gel amovible. Grâce à la technologie révolutionnaire *AIR°Gel* développée par la société *SleepNet* le masque bucco nasal *Ascend™* atteint un niveau de confort et de commodité optimum. Le système breveté de coussin gel amovible permet de retirer et de remettre en place celui-ci aisément pour un nettoyage facile ou pour un remplacement. Le masque bucco nasal *Ascend™* est disponible avec fuite intentionnelle en **3 tailles** ; S, M, L.

Touchless Spacebar™

Design d'un support frontal éliminant tout contact avec la peau avec une stabilité supérieure.

AIR°Gel

Un maximum de confort pour un poids minimum, le système breveté AIR°gel réduit les points de pression et les irritations de la peau

Coussin amovible

Maintenant, il est possible de remplacer uniquement le coussin de gel. Existe en trois tailles ; S, M, L

Coussin de gel ergonomique

Un coussin ergonomique pour une étanchéité optimale et un ajustement confortable

Fixation Harnais

Le système d'attaches du harnais permet un retrait rapide d'une main.

Coude 360°

Pour une position optimale du tuyau et faciliter la mobilité, le coude tourne à 360°

Support de harnais actif

La mobilité du support de harnais permet de suivre les mouvements du patient sans modifier l'étanchéité au niveau du coussin de gel.



L3 Médical

8, rue de la Pierre Millière - 38070 Saint Quentin Fallavier – France
Tél.: +33 (0)474 825 727 - Fax.: +33 (0)474 827 938 - contact@l3medical.com
www.l3medical.fr



"Solutions Respiratoires Innovantes" "Innovative Respiratory Solutions"

L3 Médical

Ascend™ Bucco nasal


Masque bucco nasal à coussin de gel amovible



Désassemblage :
pincer simplement
les côtés du coussin
pour le libérer de la
coque.



Assemblage :
placer l'ergot supérieur
dans l'encoche puis
pousser les ergots
inférieurs jusqu'à ce que
ceux-ci s'insèrent dans les
encoches.

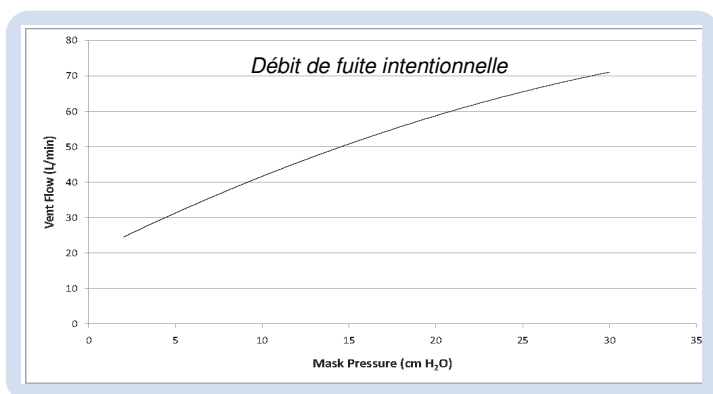

Composition du masque

Coque	PVC
Gel du coussin	Silicone qualité médicale
Enveloppe du gel	Film polyuréthane
Coude pivotant	Polycarbonate
Harnais	Breathoprène® avec SILVERtec™

Référence	Désignation	Taille	Poids (grammes)	Espace mort (ml)
50825	Kit masque avec coussins + harnais	S, M, L	NA	NA
50207	Coussin gel amovible	S	95	165
50208	Coussin gel amovible	M	104	200
50209	Coussin gel amovible	L	107	206
55051	Harnais EZ Fit	Unique	NA	NA


Résistance à 50l/min = 0,58 cmH₂O - à 100l/min = 1,02 cmH₂O

Pression d'ouverture à l'atmosphère = 1,92 cmH₂O - Pression de fermeture à l'atmosphère = 1,85 cmH₂O

Température d'utilisation : ne pas exposer le masque à des températures dépassant 60°C (140°F).

Ascend™
Coussin de gel amovible

Egalement disponible en version nasale

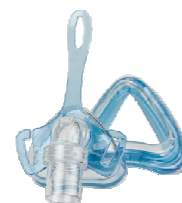

L3 Médical

8, rue de la Pierre Millière - 38070 Saint Quentin Fallavier - France

Tél.: +33 (0)474 825 727 - Fax.: +33 (0)474 827 938 - contact@l3medical.com
www.l3medical.fr